


Laryngoskope

Laryngoscopes

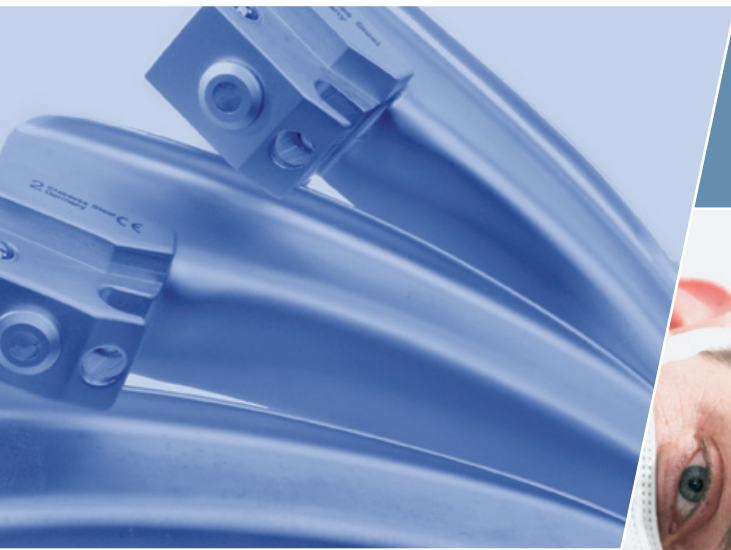

## Baby-Laryngoskop

Bei der Entwicklung dieses handlichen Kleinstkind-Laryngoskopes wurden die anatomischen Verhältnisse des Neugeborenen besonders berücksichtigt. Störende aufgelötete oder abnehmbare Lampenträger sind hier nicht vorhanden. Die mit wenigen Handgriffen auswechselbaren Spatelblätter sind mit Längsrillen versehen. Diese ermöglichen eine gute Längsführung und verhindern ein seitliches Abrutschen des Spatels von der Zunge. Voll autoklavierbar (ohne Batterien) und dauerhaft resistent gegen Schaltstörungen durch bewussten Verzicht auf die Verwendung aufwendiger Schaltechnik. Ein- bzw. Ausschalten durch Herein- bzw. Herausdrehen der Bodenkappe.

## Baby-Laryngoscope

A handy set, especially constructed for new-borns, with regard for their anatomic conditions. Easy to clean, autoclaveable (without batteries). No disfunction because of broken switch or soldered connections; for switching on or off just screw the bottom cap in or out.

## Saling Laryngoskop-Set mit 3 Spateln

### 03-111

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; Mikrospatel; 1 Glühlampe.

## Saling-Laryngoscope Set with 3 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade, narrow; blade, broad; micro-blade; 1 bulb.



03-111

## Saling Laryngoskop-Set mit 2 Spateln

### 03-101

Batteriegriff, ø 19 mm, zwei Batterien; schmaler Spatel; breiter Spatel; 1 Glühlampe.

## Saling-Laryngoscope Set with 2 blades

Battery handle, ø 19 mm, two batteries; blade narrow; blade broad; 1 bulb.

## Spatel für Saling-Laryngoskop

- ▶ **03-911** Spatel schmal
- ▶ **03-912** Spatel breit
- ▶ **03-913** Mikrospatel

## Blades for Saling-Laryngoscope

- ▶ Blade narrow
- ▶ Blade broad
- ▶ Micro blade



03-911



03-912



03-913

**Einzelteile für  
Saling-Laryngoskop**
**Components for  
Saling-Laryngoscope**

- |  |   |
|--|---|
| ▶ <b>03-902</b><br>Handgriff, ø 19 mm, für 2 Batterien | Handle, ø 19 mm,<br>for 2 batteries type AA |
| ▶ <b>99-006</b> Ersatzlampe, 2.5 V                     | Spare bulb, 2.5 V                           |



Baby- und Kleinkindlaryngoskop

Laryngoskop-Sets

Warmlicht-Laryngoskope

Kaltlicht-Laryngoskope

Baby Laryngoscopes

Sets of Laryngoscopes

Conventional Illuminated  
Laryngoscopes

Fibre Optic Laryngoscopes

